


ルセントイス®硝子体内注射用キット10mg/mLの投与準備の手順


未熟児網膜症に使用する場合はバイアルを使用してください。キットは適応外のため使用不可です。

「ルセントイス®硝子体内注射用キット10mg/mL」には、プレフィルドシリンジキットが入っています。別途30ゲージの眼科用針をご用意ください。


- 本剤は、注射前に未開封の状態室温に戻してください。室温に放置した時間が24時間を超えないように使用してください。
- プリスター包装内は滅菌されているため、使用時まで開封しないでください。
- プリスター包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形等の異常が認められる場合には使用しないでください。
- 薬液に不溶性微粒子、濁り又は変色を認めた場合には使用しないでください。

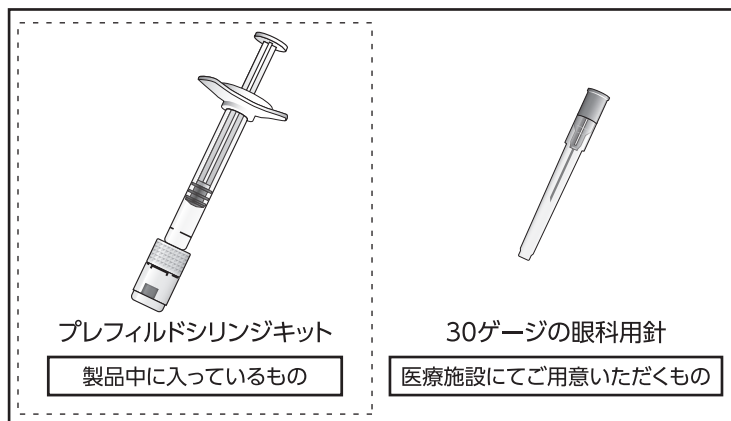


1 シリンジをプリスター包装から取り外します。

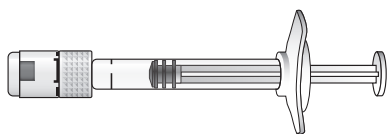


4 注射針の先端を上に向けて持ち、シリンジ内の気泡の有無を確認します。気泡が認められた場合には、シリンジを指で軽くたたき気泡を上端まで移動させます。

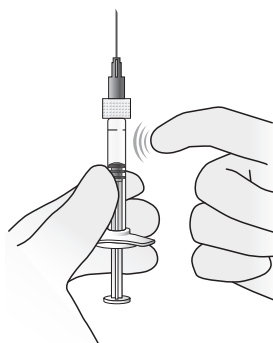


2 シリンジキャップを折ります。なお、回したりねじったりしないでください。

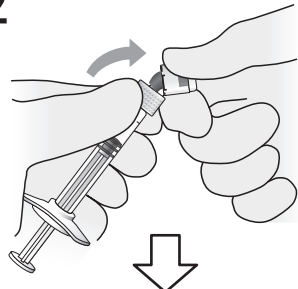

シリンジキャップを取り外します。

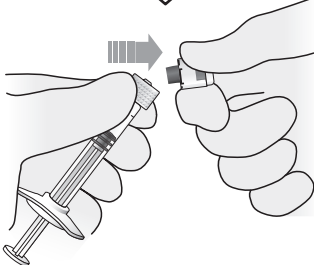


5 気泡と余剰薬液を排出し、注射液が0.05mLになるように、プランジャーストッパー先端のドーム部分の底面がシリンジに印字された標線(0.05mLに相当)に並ぶまでゆっくりとプランジャーロッドを押します。

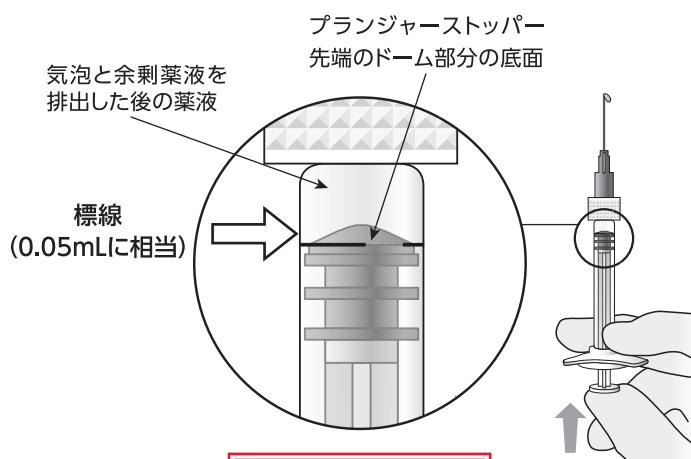

全量投与禁止

投与量には十分ご注意ください。
投与前にプランジャーストッパー先端のドーム部分の底面を標線(0.05mLに相当)に合わせ、投与量を確認してください。

3 30ゲージの眼科用針をシリンジの先端(ルアーロック)にねじってしっかりと装着します。

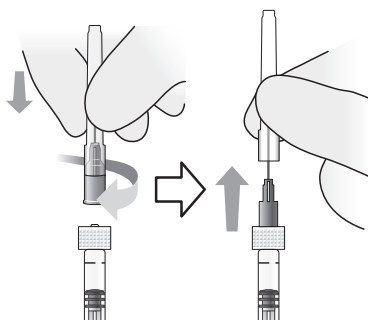

注意しながら30ゲージの眼科用針のキャップをはずします。

これで投与準備は完了です。

未熟児網膜症に使用する場合はバイアルを使用してください。キットは適応外のため使用不可です。

【注意】この後、注射針を拭かないでください。